

clinell®

www.clinell.com

Καταστρέφει
τουλάχιστον
το **99,99%**
των Νοροϊών, σε
λιγότερο από
1 λεπτό¹



ΣΕΙΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CLINELL UNIVERSAL ΤΟ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΠΑΝΑΚΙ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η πιο αποτελεσματική σύνθεση γενικής χρήσης στην παγκόσμια αγορά

Ένα ισχυρό μείγμα βιοκτόνων, με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, που αποτρέπει την μικροβιακή αντοχή και τη δημιουργία υπερ-ανθεκτικών μικροβίων².

Γενική χρήση

Δρα ταυτόχρονα ως απολυμαντικό αλλά και ως καθαριστικό, αντικαθιστώντας τη χρήση πολλών διαφορετικών προϊόντων καθαρισμού επιφανειών.

Δερματολογικά ελεγμένο

Κατάλληλο για συχνή χρήση χωρίς να προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Αποδεδειγμένα βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, μυκητοκτόνο και φυματιοκτόνο

Δραστικό κατά MRSA, Ακινετοβακτήριο, VRE, Κλεμψιέλλα, Ψευδομόναδα, Φυματίωση (TB), Νοροϊό, Ηπατίτιδα B & C καθώς και πολλών ακόμα μικροοργανισμών¹.

Πιστοποιημένο με CE Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa

Η σειρά που περιλαμβάνει τα προϊόντα Universal Bucket, Universal Tub, 200 Wipe Pack, 50 Wipe Clip Pack, 50 Wipe Adhesive Back & Maceratable Wipes, είναι συμμορφούμενη με την Οδηγία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατηγορία IIa.

Καμία ζημιά σε επιφάνειες ή εξοπλισμό

Ιδανικά για χρήση σε στρώματα και ασφαλή για χρήση σε πολλούς τύπους επιφανειών από λάστιχο, πλαστικό και μέταλλο.

Εύκολα, απλά και αποτελεσματικά

Αποφυγή δοσολογικών λαθών: τα προ-δοσολογημένα προϊόντα φέρουν πάντα τη σωστή συγκέντρωση της δραστικής ουσίας.

Οικονομία στη χρήση

Εξοικονομείτε χρήματα, αντικαθιστώντας πολλά διαφορετικά καθαριστικά προϊόντα με ένα μόνο προϊόν.

ΣΥΝΘΕΣΗ UNIVERSAL

Η μοναδική, πατενταρισμένη, σύνθεσή του, κατατάσσει το απολυμαντικό πανάκι Clinell Universal ως το πιο αποτελεσματικό υγρό πανάκι στην αγορά. Ο συνδυασμός των βιοκτόνων που περιέχει, λειτουργεί ως ένα ισχυρό υψηλής απόδοσης απολυμαντικό, αποτρέποντας την μικροβιακή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου².



Αντιμικροβιακή δράση

Ισχυρή, πατενταρισμένη, βιοκτόνα σύνθεση -βασισμένη σε ένα καινοτόμο μείγμα ενώσεων τεταρτοταγούς αμμωνίου και πολυμερικής διγλουανιδής - με ξεχωριστούς μηχανισμούς δράσης για κάθε συστατικό. Διασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα αντι-μικροβιακής δράσης ενώ παράλληλα λειτουργεί κατά της μικροβιακής αντοχής.

Σύνθεση που περιλαμβάνει βιοκτόνα δράση κατά:

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΓΚΡΑΜ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Περιλαμβάνουν: Σταφυλόκοκκο χρυσίζοντα και MRSA, Εντερόκοκκο και VRE.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΓΚΡΑΜ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Περιλαμβάνουν: Ψευδομονάδα, E.coli, Ακινετοβακτήριο, Κλαμπσιέλλα και Σαλμονέλα.

ΜΥΚΗΤΕΣ

Περιλαμβάνουν: Ασπέργιλλο, Κάντιντα, Πενικίλλιο.

ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑ

Περιλαμβάνουν: Μυκοβακτήρια terrae και Μυκοβακτήρια bovis.

ΕΓΚΑΨΙΔΙΩΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ

Περιλαμβάνουν: Απλό ερπητοϊό 1 & 2, Γρίπη H1N1 & H5N1, Ηπατίτιδα B & C και HIV.

ΜΗ ΕΓΚΑΨΙΔΙΩΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ

Περιλαμβάνουν: Νοροϊό και Ιό Ρότα

Χρόνος επαφής

Ο χρόνος επαφής είναι εκείνος ο χρόνος που χρειάζεται ένα απολυμαντικό προϊόν να βρίσκεται σε επαφή με έναν μικροοργανισμό για να τον καταστρέψει.

Αν ένα απολυμαντικό προϊόν ισχυρίζεται την κατά 99,9% καταστροφή του MRSA μέσα σε 1 λεπτό, τότε η επιφάνεια θα πρέπει να παραμείνει εμφανώς υγρή για τουλάχιστον 1 λεπτό, επιτρέποντας στο απολυμαντικό να βρίσκεται σε επαφή με τον μικροοργανισμό και να τον καταστρέψει.

Είναι σημαντικό όταν χρησιμοποιούμε απολυμαντικά πανάκια, να αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώνει φυσικά και όχι σκουπίζοντάς την.

Μη εφαρμόσιμοι, εκτεταμένοι, χρόνοι επαφής μπορεί να καταλήξουν σε μη αποτελεσματικά προϊόντα. Αντιθέτως, στη Clinell πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι για να πιστοποιηθεί ότι όλοι οι χρόνοι επαφής, και οι σχετικοί ισχυρισμοί αποτελεσματικότητας των προϊόντων της, είναι επιτεύξιμοι σε πραγματικές συνθήκες.

Clip pack 50s

Μέσα από τη πρωτοβουλία 'Design Bugs Out', αναβαθμίσαμε το πρώτο σε πωλήσεις προϊόν μας, απολυμαντικό πανάκι γενικής χρήσης Clinell Universal, ενσωματώνοντας του ένα πρακτικό κλιπ για ασφαλή και προσβάσιμη τοποθέτηση, δίπλα σας, αλλά και ταυτόχρονα μακριά από εστίες μόλυνσης, όπως το πάτωμα.

Το ενσωματωμένο κλιπ είναι ενισχυμένο και σχεδιασμένο για ασφαλές πιάσιμο αλλά και βέλτιστη τοποθέτηση σε συσκευές παρακολούθησης ασθενή, ιατρικές καρέκλες, πλαίσια κρεβατιών, βάσεις οθόνης, τρόλεϋ κα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑ Ακινετοβακτήριο <i>baumannii</i> Εντερόκοκκος <i>faecalis</i> Εντερόκοκκος <i>faecium</i> (VRE) Εντερόκοκκος <i>hirae</i>	TEST EN13727 EN13727 EN13727 EN13727 EN14561 EN13727 EN13727
Εσερίγια <i>coli</i> Κλεμπσιέλλα πνευμονίας Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος ανθεκτικός σε μεθικιλίνη Ψευδομονάδα αεριογόνος	EN1276 EN13727 EN14561 EN13727 EN14561 EN1276
Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος Δονάκιο χολέρας	
ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΑ Μυκοβακτήριο βοοειδών Μυκοβακτήριο <i>terrae</i>	EN14348 EN14348 EN14563
ΜΥΚΗΤΕΣ Ασπέργιλλος μέλας Ωίδιο το λευκάζον	EN13697 EN14562 EN13727 EN14562
ΙΟΙ H1N1 και H5N1 Ηπατίτιδα B Ηπατίτιδα C Νοροϊός HIV	ASTM E1052 EN14476 EN14476 EN14476



Πανάκια για την απολύμανση και τον καθαρισμό μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών.



Καθαρισμός μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών - επιφανειών και εξοπλισμού


Τα πιστοποιημένα κατά CE Πανάκια Clinell Universal, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό και την απολύμανση των παρακάτω επιφανειών και εξοπλισμού. Αυτές οι επιφάνειες σπάνια καθαρίζονται ενώ έχει παρατηρηθεί ότι προκαλούν λοιμώξεις³⁻⁶.

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| - Μηχανήματα υπερήχων | - Αισθητήρες Doppler | - Συσκευές Αρτηριακής Πίεσης | - Μανσέτες Αρτηριακής Πίεσης |
| - Αισθητήρες παλμικού οξύμετρου | - Συσκευές ECG | - Ακτινολογικός εξοπλισμός | - Οθόνες |


CE 0473

Πιστοποιημένα κατά CE Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Τα προϊόντα bucket (και ανταλλακτικό), tub (και ανταλλακτικό), Spray, 50 pack, 200 wipe pack και maceratable wipes είναι όλα πιστοποιημένα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIa.


Πως να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις επιφάνειες

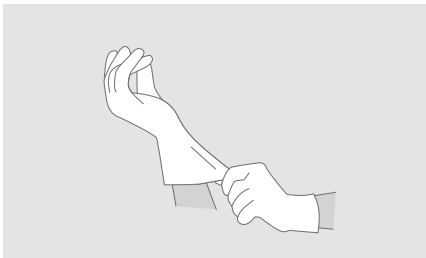


Αξιολογήστε την κατάσταση και φορέστε τα ενδεικνυόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Πάρτε ένα πανάκι από τη συσκευασία.

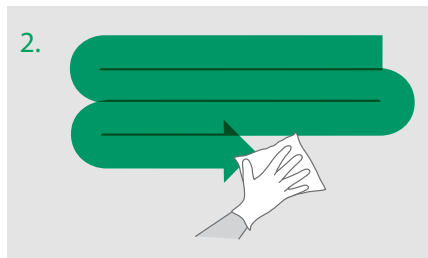


2. Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα S, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές.

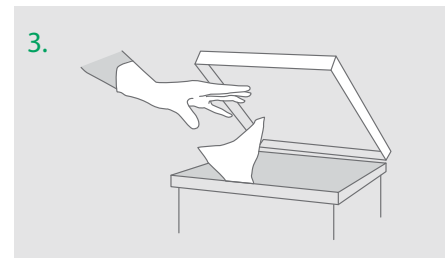


3. Χρησιμοποιείτε καινούργιο πανάκι, αν αυτόπου χρησιμοποιείτε στεγνώσει ή βρωμίσει, πετάξτε το βρώμικο στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

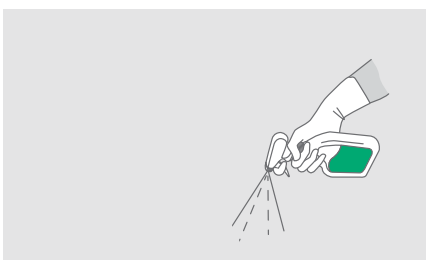

Πιάστε και στρίψτε για να απασφαλίσετε το στόμιο. Πατήστε τη σκανδάλη και ψεκάστε ομοιόμορφα την επιφάνεια.

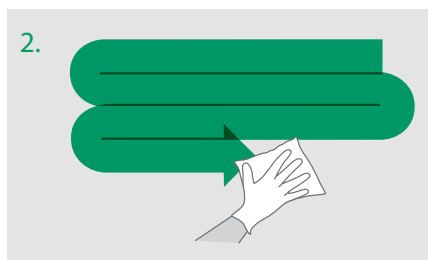

2. Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα S, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές.

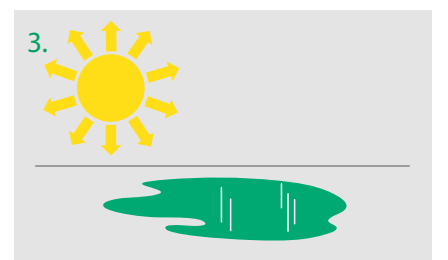

3. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αποδεδειγμένα καταστρέφει
τουλάχιστον το
99,999% των μικροβίων,
δρώντας στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα.



Τα Πανάκια Clinell Universal Wipes 40 pack μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση γενικών επιφανειών και εξοπλισμού. Αν δεν είστε βέβαιοι, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Ομάδα Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων. Η παρακάτω λίστα επιφανειών που μπορούν να καθαριστούν με τα πανάκια της Clinell είναι ενδεικτική:

- Καρέκλες
- Γραφεία
- Χερούλια
- Στρώματα
- Πάγκοι εργασίας
- Τρόλεϋ
- Πληκτρολόγια & Εξοπλισμός
- Ιμάντες⁸
- Κλειδαριές
- Τροχήλατα τραπέζια
- Νεροχύτες
- Διακόπτες
- Κομοδίνα
- Βοηθήματα περπατήματος
- Αναπηρικά αμαξίδια
- Πατώματα
- Ντουζιέρες
- Δίσκοι φαγητού
- Τηλεοράσεις
- Τηλέφωνα
- Κουπαστές

UNIVERSAL - Σειρά Απολυμαντικών Προϊόντων Γενικής Χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΠΡΟΪΟΝ
CW200	6	ΠΑΚΕΤΟ	200 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Wipes 200*
CWCP50	24	ΠΑΚΕΤΟ	50 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Clip Pack 50*
CWAB50	24	ΠΑΚΕΤΟ	50 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Wipes Adhesive Pack 50*
CW50	24	ΠΑΚΕΤΟ	50 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Clip Pack 50 (withoutClip)*
CW40	24	ΠΑΚΕΤΟ	40 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Wipes 40
CWTUB100	8	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Tub 100*
CWTUB100R	8	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	100 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Wipes Tub Refill 100*
CWBUC225	4	ΚΟΥΒΑΣ	225 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Wipes Bucket*
CWBUC225R	4	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ	225 ΠΑΝΑΚΙΑ	Clinell Universal Wipes Bucket Refill 225*
CDS500	12	ΔΟΧΕΙΟ	500 ml	Clinell Universal Spray*
CWD	20	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ DISPENSER	-	Clinell Universal Wall Mounted Dispenser

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- Σύμφωνα με EN 14476.
- Blomfield SF. Significance of biocide usage and antimicrobial resistance in domiciliary environments. Journal of Applied Microbiology. 2002;92(s1).
- The Design Council. Case study, Design bugs out [Διαθέσιμο από <http://www.designcouncil.org.uk/resources/case-study/design-bugs-out>]
- Sanders S. The stethoscope and cross-infection. Br J Gen Pract. 2003 Dec;53(497):971-2.
- Cohen SR, McCormack DJ, Youkhana A, Wall R. Bacterial colonization of stethoscopes and the effect of cleaning. J Hosp Infect. 2003 Nov;55(3):236-7.
- Buus-Frank, M.E. Hands that heal-hands that harm Advances in Neonatal Care 2004. Oct;4:5:251-255.
- Bureau-Chalot F, Drieux L, Pierrat-Solans C, Forte D, de Champs C, Bajolet O. Blood pressure cuffs as potential reservoirs of extended-spectrum β-lactamase VEB-1- producing isolates of Acinetobacter baumannii. Journal of Hospital Infection. 2004 Sep 30;58(1):91-2.
- Lobaz S, Diddle R, Collins J, White D. Pathogenic colonisation of hospital badges and neck lanyards in the anaesthetic /theatre environment. Anaesthesia. 2012 Feb 1;67:44.

* CE 0473

Κατηγορία IIa Ιατροτεχνολογικό Προϊόν

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Πρωτοπόρες Υπηρεσίες Φροντίδας και Εκπαίδευση Clinell

Συμπεριλαμβάνει καινοτόμα kit εκπαίδευσης, εξειδικευμένους νοσοκομειακούς εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό, αφίσες και εγκατάσταση dispenser.

Επικοινωνήστε μαζί μας: 2108049747 ή info@biokon.gr